



## Tornillo Canulado con Arandela Direccional Integrada



fijación  
INTERNA



placas y  
tornillos



Características	Beneficios
Arandela integrada	Fijación segura y extracción fácil: la arandela integrada en la cabeza permanece incorporada al tornillo Si es necesario, se puede quitar la arandela con el instrumento específico
Arandela direccional	Compresión y adaptabilidad a la superficie ósea: la geometría de la cabeza permite a la arandela un apoyo completo
Superficie lisa	Tratamiento superficial para limitar la osteointegración
Tornillo canulado	Mayor precisión de introducción
Punta autorroscante	Para simplificar la instalación
Filo posterior	Para facilitar la extracción
Avance rápido	Introducción mas rápida respecto a los tornillos estandar: rosca doble (tornillos $\varnothing 6.5$ mm y $\varnothing 7.5$ mm)

## Rondò: tornillo metaepifisario con rosca para esponjoso



### Tornillos Rondò

TITANIO

ESTÉRIL



#### MEDIDAS




Tornillo  $\varnothing 3$  mm,  
longitud desde 10 mm a 30 mm  
(aumentar 2 mm)




Tornillo  $\varnothing 4$  mm,  
longitud desde 14 mm a 65 mm  
(aumentar 2 mm, desde 40 mm a 65 mm aumentar 5 mm)



Tornillo  $\varnothing 5$  mm,  
longitud desde 20 mm a 70 mm  
(aumentar 2 mm, desde 50 mm a 70 mm aumentar 5 mm)

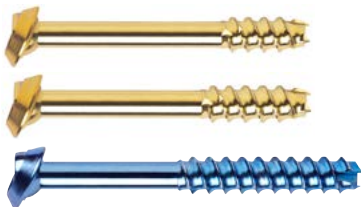

Tornillo  $\varnothing 6,5$  mm,  
Rosca Corta 16 mm - Rosca Media 22 mm  
Rosca Larga 32 mm  
longitud desde 30 mm a 120 mm  
(aumentar 5 mm)

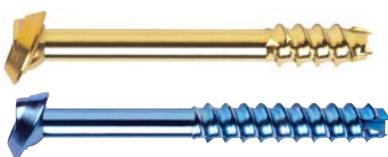

Tornillo  $\varnothing 7,5$  mm,  
Rosca Corta 20 mm - Rosca Larga 35 mm  
longitud desde 40 mm a 120 mm  
(aumentar 5 mm)

#### INDICACIONES

